



IT Istruzioni per l'uso

FLQ

VI.III GMN: 872076918P02N9

IT Istruzioni per l'uso



NON METTERE IMBRACATURE DI SICUREZZA DURANTE IL TRASPORTO! Prima del montaggio e dell'uso, leggere le istruzioni per applicare correttamente il prodotto

Aspetti generali:

L'imbracatura di posizionamento FLO2 è composta da una morbida imbottitura e da una fettuccia in nylon. La corretta regolazione e la postregolazione consentono di posizionarla in modo confortevole, e ottimale.

Il materiale si adatterà al corpo dell'utente per ottenere una distribuzione ottimale della pressione. Le cinghie flessibili sui fianchi consentiranno all'utente di respirare liberamente.

La posizione del montaggio sulla sedia a rotelle e la relativa regolazione degli angoli sono essenziali per il corretto funzionamento del prodotto.

Montaggio e Configurazione:

Il montaggio e la regolazione devono essere eseguiti da personale (sanitario) competente.

Manutenzione:

Lavare a mano a max 30°C e, se necessario, con un detersivo delicato. Non stirare. centrifugare, né asciugare in una asciugatrice.

Contenuto della confezione:

Controllare il contenuto della confezione per verificare che l'imbracatura e le parti corrispondenti siano della dimensione corretta. L'indicazione della misura si trova sul retro dell'imbracatura stessa.



FLO2 Imbracatura XS SKU: P02XS UDI-DI: 8720769180141



FLO2 Imbracatura L SKU: P02I UDI-DI: 8720769180172



FLO2 Imbracatura S SKU: P02S UDI-DI: 8720769180158




(Female) SKU: P02M-F UDI-DI: 8720769180189



FLO2 Imbracatura M SKU: P02M UDI-DI: 8720769180165



(Female) SKU: P02L-F

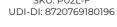



Morsetto per tubo (x4) SKU: RTC

UDI-DI: 8720769180202



Fibbia scorrevole 25mm (x4)

Per imbracatura XL, L, M, S SKU: 3GL25 UDI-DI: 8720769180486



Fibbia a ribalta 25mm (x4)

Per imbracatura XL, L, M, S SKU: KG25 UDI-DI: 8720769180134



Fibbia scorrevole 20mm (x4)

Per imbracatura XS SKU: 3GL20 UDI-DI: 8720769180493



Fibbia a ribalta 20mm (x4)

Per imbracatura XS SKU: KG20 UDI-DI: 8720769180547



Guida cinghia 25mm (x4)

SKU: BG25 UDI-DI: 8720769180523



Bottone magnetico (x2)

SKU: MBUD UDI-DI: 8720769180424



Guida cinghia 15mm (x4)

SKU: BG15

UDI-DI: 8720769180530

2 3 **POSIGO POSIGO**


Montaggio degli spallacci:

Determinare la posizione delle fibbie pieghevoli prendendo come riferimento il centro della spalla dell'utente. L'altezza delle fibbie pieghevoli determinerà il corretto funzionamento del prodotto. Nel farlo seguire le istruzioni del terapeuta o del tecnico.

Le fibbie pieghevoli possono essere montate a livello della linea delle spalle (Figura 2) oppure al di sotto della stessa (Figura 3). In questo secondo caso si eserciterà una maggiore pressione sulle spalle stesse.

Fissare le fibbie pieghevoli nella posizione desiderata utilizzando i morsetti per le canne (Figura 1) oppure direttamente sullo schienale tramite le viti M5. Rispettare sempre le istruzioni del produttore della sedia a rotelle.



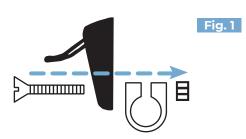

Rimuovere la vite dal morsetto per le canne, e montarci sopra la fibbia pieghevole, come mostrato. Utilizzare la striscia di gomma in dotazione per ottenere una maggiore aderenza al telaio della sedia a rotelle.

Controllare regolarmente l'usura e il gioco dell'imbracatura e delle componenti di montaggio. Controllare regolarmente anche la tensione delle cinghie e delle parti dell'imbottitura.



Ruote vita/anca:

A questo punto, fissare le fibbie pieghevoli che assicurano le due parti flessibili inferiori della l'imbracatura (contrassegnate con "vita") al telaio della sedia a rotelle.

Queste fibbie a clip devono essere installate all'interno della zona blu (Figura 4), e consentire alla cinghia di scorrere comodamente all'interno della parte inferiore dell'arco toracico (preferibilmente ± 45°).

Le cinghie da 25 mm (S - XL) o 15 mm (XS) possono ora essere inserite all'interno della fibbia pieghevole. Sistemare l'utente nella posizione desiderata.

La quantità di tensione sulle due cinghie superiori (della spalla) determinerà il grado di pressione sulle spalle, e il grado di retrazione. Stabilire sempre questo livello di tensione in collaborazione con un terapeuta o una persona competente.



Quando si stabilisce la direzione delle cinghie per i fianchi/la vita, occorre tenere conto della presenza di eventuali sonde addominali, affinché l'imbracatura non le ostruisca.

Montaggio con fibbie a scorrimento.

Se il telaio della sedia a rotelle non è adatto per il montaggio con i morsetti per le canne o con le fibbie pieghevoli, le cinghie possono anche essere fissate utilizzando le fibbie a scorrimento in dotazione.

Far passare l'estremità della cinghia attraverso la fibbia scorrevole (Figura 5). Assicurarsi che la fibbia sia posizionata all'altezza della posizione di fissaggio desiderata sulla sedia a rotelle (vedere anche le Figure 2 e 3).

Avvolgere l'estremità della cinghia intorno al telaio della sedia a rotelle, e farla passare attraverso la fibbia scorrevole (Figure 6 e 7).

A questo punto, tirare l'estremità della cinghia più forte possibile, affinché la fibbia scorrevole aderisca bene al telaio della sedia a rotelle (Figura 8).









5

Controllare regolarmente che le cinghie e le fibbie a triplo scorrimento non abbiano gioco

4 POSIGO POSIGO

Stringere le parti da allacciare allentate.

Per evitare che le estremità allentate delle cinghie si impigliano tra le parti mobili della sedia a rotelle tali estremità dovranno essere assicurate tramite le relative guide.

Far passare l'estremità libera della cinghia attraverso la guida (Figura 9), e quindi bloccare la cinghia stessa con il relativo morsetto (Figura 10).



Apertura / chiusura / smontaggio.

Le chiusure laterali a scatto su ciascuna cinghia di fissaggio (Figura 11) consentono di aprire/rimuovere l'imbracatura.

La chiusura a scatto laterale può essere aperta premendo con il pollice e l'indice attraverso il tessuto sotto il quale si trova la chiusura a scatto laterale (Figura 12).





Se l'utente non è fisicamente o cognitivamente in grado di aprire l'imbracatura in caso di emergenza, un assistente deve essere sempre presente durante l'utilizzo dell'imbracatura stessa.

Magneti integrati.

Le cinghie vita/anca contengono un magnete all'altezza della fibbia (Figura 13), e possono essere utilizzate per garantire una migliore aderenza al telaio metallico della sedia a rotelle durante gli spostamenti.



Per i telai delle sedie a rotelle in materiale non magnetico, è possibile applicare nella posizione desiderata i magneti autoadesivi in dotazione.





PERICOLO DI SGANCIAMENTO
Controllare i bottoni magnetici prima di ogni utilizzo.



POSIGO

The Hague Care Development BV Jachtwagen 29 3897 AM Zeewolde (NL)

www.posigo.nl info@posigo.nl