



FLO2 Positioneringsvest



NL Gebruiksaanwijzing

V1.1NL
GMN: 872076918P02N9

FLO₂

(NL) Gebruiksaanwijzing



GEEN VEILIGHEIDSHARNAS VOOR TRANSPORT!

Lees voor montage en gebruik de instructies om dit product op de juiste manier toe te passen.

Algemeen:

Het FLO2 Positioneringsvest is samengesteld uit zachte polstering en nylon band. Door juiste instelling en na-stelbaarheid kan er comfortabel en perfect gepositioneerd worden.

Het materiaal volgt de contouren van de gebruiker voor een optimale drukverdeling. De flexibele heupbanden laten de gebruiker vrij ademen.

De plaats van de montage op de rolstoel en bijhorende hoekinstelling is essentieel voor de werking van het product.

Montage en Instelling:

Montage en instelling dient te worden uitgevoerd door bekwaam (zorg) personeel.

Onderhoud:

Handwas max 30°C en eventueel wasmiddel voor fijne was. Niet strijken, centrifugeren of in de droogtrommel drogen.



Inhoud verpakking:

Controleer de inhoud van de verpakking op de juiste maat en bijbehorende onderdelen. De maataanduiding bevindt zich op de achterzijde van het vest.



FLO2 Vest XS

SKU: P02XS

UDI-DI: 8720769180141



FLO2 Vest S

SKU: P02S

UDI-DI: 8720769180158



FLO2 Vest M

SKU: P02M

UDI-DI: 8720769180165



FLO2 Vest L

SKU: P02L

UDI-DI: 8720769180172



FLO2 Vest M (Female)

SKU: P02M-F

UDI-DI: 8720769180189



FLO2 Vest L (Female)

SKU: P02L-F

UDI-DI: 8720769180196



Buis (x4)

SKU: RTC

UDI-DI: 8720769180202



Klapgesp 25mm (x4)

Voor vest XL, L, M, S

SKU: KG25

UDI-DI: 8720769180134



Klapgesp 20mm (x4)

Voor vest XS

SKU: KG20

UDI-DI: 8720769180547



Magneetbud (x2)

SKU: MBUD

UDI-DI: 8720769180424



Tri-glide 25mm (x4)

Voor vest XL, L, M, S

SKU: 3GL25

UDI-DI: 8720769180486



Tri-glide 20mm (x4)

Voor vest XS

SKU: 3GL20

UDI-DI: 8720769180493



Bandgeleider 25mm (x4)

SKU: BG25

UDI-DI: 8720769180523



Bandgeleider 15mm (x4)

SKU: BG15

UDI-DI: 8720769180530

Montage schouderbanden:

Bepaal de positie voor de klappgespen, houd hierbij het midden van de schouder van de cliënt aan. **De hoogte van de klappgespen bepalen de werking van het product. Volg hierbij de aanwijzing van de therapeut of technicus.**

De klappgespen kunnen op gelijke hoogte met de schouderlijn worden gemonteerd (fig. 2) of eronder (fig. 3). Bij montage van de gespen onder de schouderlijn wordt meer druk uitgeoefend op de schouders.

Bevestig de klappgespen op de gewenste plaats met behulp van de buisklemmen (fig. 1). Of direct op de rugleuning met M5 schroeven. Houd hierbij altijd rekening met aanwijzingen van de rolstoelfabrikant.



Fig. 2



Fig. 3

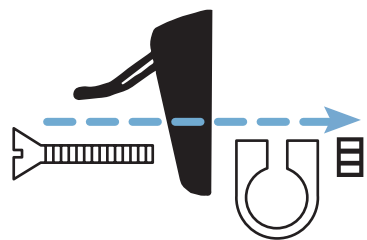


Fig. 1

Fig. 1: Verwijder de schroef uit de buisklem en monteer de klappesp volgens het voorbeeld aan de buisklem. Gebruik de meegeleverde rubberen strip voor extra grip op het frame van de rolstoel.

⚠️ Controleer het vest en de montagematerialen regelmatig op slijtage / speling. Controleer ook regelmatig de spanning op de riemen en de polsterdelen.

Waist / Heup banden:

Bevestig nu de klappgespen waarmee de twee onderste flexibele delen van het vest (aangeduid met 'waist') aan het frame van de rolstoel vastgezet kunnen worden.

Deze klappgespen moeten worden aangebracht in de blauwe zone (fig. 4) en zorgen ervoor dat de band comfortabel over het onderste deel van de ribbenboog kan lopen (bij voorkeur $\pm 45^\circ$)

De 25mm (S – XL) of 15 mm (XS) banden kunnen nu in de klappesp geschoven worden. Breng de cliënt in de gewenste positie.

De hoeveelheid spanning op de twee bovenste (schouder) banden bepalen de mate van druk op de schouders en de mate van retractie. Bepaal deze spanning altijd in samenwerking met een therapeut of hiertoe bevoegd persoon.



Fig. 4

⚠️ Houd bij de montage-richting van de heup/waistbanden rekening met eventuele buiksondes, zodat het vest geen obstructie kan vormen.

Montage mbv schuifgespen.

Wanneer het frame van de rolstoel niet geschikt is voor montage met de buisklemmen / klappgespen, kunnen de banden ook vastgezet worden met behulp van de meegeleverde tri-glide schuifgespen.

Voer het uiteinde van de band door de schuifgesp (fig. 5). Zorg ervoor dat de gesp ter hoogte van de gewenste bevestigingspositie op de rolstoel geplaatst wordt (zie ook fig. 2 en 3).

Sla het uiteinde van de band om het frame van de rolstoel en voer deze terug door de schuifgesp (fig. 6, 7)

Trek nu het uiteinde van de band zo stevig mogelijk aan zodat de schuifgesp strak tegen het frame van de rolstoel komt te zitten (fig. 8).



Fig. 5

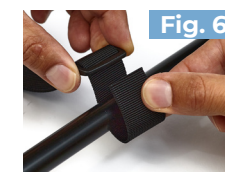


Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

⚠️ Controleer de banden en de tri-glide schuifgespen regelmatig op speling.

Opbinden losse banden.

Om te voorkomen dat de losse uiteinden van de banden tussen bewegende delen van de rolstoel verstrikt raken, moeten deze uiteinden worden vastgezet door middel van de bandgeleiders.

Schuif het losse uiteinde van de band door de geleider (fig. 9) en klem vervolgens de band vast door middel van de clip (fig. 10).



Fig. 9



Fig. 10

Openen / sluiten / afnemen.

Door middel van de zijklipsluitingen aan iedere bevestigingsriem (fig. 11) kan het vest worden geopend / afgenomen.

De zijklipsluiting kan worden geopend door met duim en wijsvinger door de stof te drukken waaronder de zijklipsluiting zich bevindt (fig. 12).



Fig. 11



Fig. 12

 Wanneer de gebruiker lichamelijk of cognitief niet in staat is het vest in geval van nood te openen, dient te allen tijde een zorgverlener aanwezig te zijn tijdens gebruik van het vest.

Geïntegreerde magneten.

De waist / heup banden bevatten een magneetje ter hoogte van de sluiting (fig. 13) en kunnen hiermee tijdens transfers tegen het metalen frame van de rolstoel geplakt worden.



Voor rolstoel frames die van niet-magnetisch materiaal zijn gemaakt, kunnen de bijgeleverde zelfklevende magneetbuds op de gewenste positie aangebracht worden.



Fig. 13



INSLIKGEVAAR

Controleer de magneetbuds voor ieder gebruik.



POSIGO

The Hague Care Development BV
Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde (NL)

www.posigo.nl
info@posigo.nl

© 2023 Alle rechten voorbehouden

CE