



Modulaire
Positioneringsgordel



Gebruiksaanwijzing

p2

V1.0
GMN: 872076918P01N7



GEEN VEILIGHEIDSRIEM VOOR TRANSPORT!
Lees voor montage en gebruik de instructies
helemaal door om dit product op de juiste
manier toe te passen.

Algemeen:

De positioneringsgordel is samengesteld uit zachte polstering en nylon band. Door juiste instelling en na-stelbaarheid kan er comfortabel gepositioneerd worden.

Het materiaal volgt de contouren van de gebruiker voor een optimale drukverdeling. De plaats van de montage op de rolstoel en bijhorende hoekinstelling is belangrijk voor de werking van het product.

Montage en Instelling:

Montage en instelling dient te worden uitgevoerd door bekwaam (zorg) personeel.

Onderhoud:

Handwas max 30°C en eventueel wasmiddel voor fijne was. Niet strijken, centrifugeren of in de droogtrommel drogen.



Inhoud verpakking:

Controleer de juiste maat gordel en bijbehorende onderdelen:



Gordel XL

SKU: P01XL
UDI-DI: 8720769180059



Gordel L

SKU: P01L
UDI-DI: 8720769180042



Gordel M

SKU: P01M
UDI-DI: 8720769180035



Gordel S

SKU: P01S
UDI-DI: 8720769180028



Gordel XS

SKU: P01XS
UDI-DI: 8720769180011



Buiscklem (x2)

SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202



Tri-glide 38mm (x2)

Voor gordel XL, L, M, S
SKU: 3GL38
UDI-DI: 8720769180479



Bandgeleider 38mm (x2)


SKU: BG38
UDI-DI: 8720769180509



Extra bij configuratie met 4-punts band:

4-punts band (x2)

SKU: 4P20
UDI-DI: 8720769180110

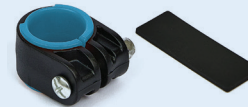

Buiscklem (x2)

SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202



Klapgesp 40mm (x2)

Voor gordel XL, L, M, S
SKU: KG40
UDI-DI: 8720769180127



Tri-glide 20mm (x2)

Voor gordel XS
SKU: 3GL20
UDI-DI: 8720769180493



Bandgeleider 20mm (x2)

SKU: BG20
UDI-DI: 8720769180516



Klapgesp 25mm (x2)

Voor gordel XS
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134



Magneetknop (x2)

SKU: MBUD
UDI-DI: 8720769180424



Inslikgevaar.
Kleine onderdelen buiten
bereik van kinderen
houden.



Klapgesp 25mm (x2)

SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Montage rolstoel.

1: Bevestig de klapgespen op de gewenste plaats met behulp van de buisklemmen (fig. 1). Houd hierbij altijd rekening met aanwijzingen van de rolstoelfabrikant.

1.1: De klapgesp van de positioneringsband kan worden aangebracht in de oranje zone over de bovenbenen (fig. 2). Hierbij maakt de positioneringsband een hoek van ± 90 graden met het zitgedeelte. Deze methode geeft druk op de bovenbenen en steun tegen het bekken.

1.2: De klapgesp kan tevens worden aangebracht in de blauwe zone in een hoek van ± 45 graden (fig. 3). Met deze methode kan er meer druk op de bekkenrand (sips) worden gegeven.

De 40mm (S – XL) of 25 mm (XS) banden kunnen nu in de klapgesp geschoven worden. Breng de cliënt in de gewenste positie, de positie van het bekken is hierbij leidend.



Controleer de banden regelmatig op slijtage en of de klapgespen voldoende functioneren.

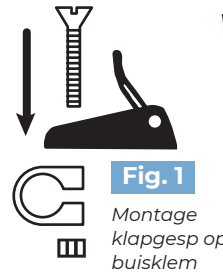


Fig. 1

Montage klapgesp op buisklem



Fig. 2



Fig. 3

Montage mbv schuifgesp.

Wanneer de rolstoel niet geschikt is voor de buisklemmen met klapgespen, kunnen de banden ook vastgezet worden met behulp van de meegeleverde tri-glide schuifgespen.

1.3: Voer het uiteinde van de band door de schuifgesp (fig 4.). Zorg ervoor dat de gesp ter hoogte van de gewenste bevestigingspositie op de rolstoel gepositioneerd wordt (zie ook fig. 2 en 3).

1.4: Sla het uiteinde van de band om de rolstoel en voer deze terug door de schuifgesp (fig. 5, 6)

1.5: Trek nu het uiteinde van de band zo stevig mogelijk aan zodat de schuifgesp strak tegen de rolstoel komt te zitten (fig. 7).



Controleer de banden en de tri-glide schuifgespen regelmatig op speling.



Fig. 4

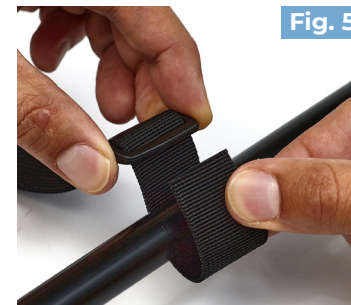


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

Afstellen gordel.

2: Zorg dat de beide draaiknoppen helemaal naar links gedraaid staan. Dit is de meest ontspannen stand (fig. 8).

3: Trek beide kanten van de positioneringsgordel aan totdat deze aansluit aan het bekken of de bovenbenen (fig. 9).

4: Controleer met een vinger tussen de polstering en cliënt wat de mate van spanning is (fig. 10).

5: Controleer of de polsterdelen op de juiste links/rechtsverdeling op de cliënt aansluiten (fig. 10). Lees de maatvoering af op de band.

Sluit nu de beide klappespen. De gordel is nu klaar voor gebruik.



Fig. 9



Fig. 10



Controleer regelmatig de spanning op de gordel en wijzig deze indien nodig.

Fijnafstelling.

De gordel kan op ieder gewenst moment bijgesteld worden

Door de draaiknoppen rechtsom te draaien, wordt de spanning op de band verhoogd. Met een vinger tussen band en cliënt kan dit worden ingeschat. Verhoog de spanning totdat de juiste steun voor het bekken is bereikt. Draai de knoppen linksom voor minder spanning (fig. 11).



Fig. 11

Opruimen losse banden.

Om te voorkomen dat de losse uiteinden van de banden tussen draaiende delen van de rolstoel komen, dienen deze worden vastgezet met de bandgeleiders.

Schuif het uiteinde van de band door de geleider (fig. 12) en zet de band vast door middel van de clip (fig. 13).



Fig. 12



Fig. 13

Geïntegreerde magneten.

In de polstering zijn magneten verwerkt waardoor de beide kanten van de gordel handig tegen het frame van de rolstoel geplakt kunnen worden om zo het in- en uitstappen te vergemakkelijken (fig. 14,15).



Voor rolstoelen die van niet-magnetisch materiaal zijn gemaakt, kunnen de bijgeleverde zelfklevende magneetknoppen op de gewenste positie aangebracht worden.



Inslikgevaar!
Controleer de magneetknoppen voor ieder gebruik.



Fig. 14



Fig. 15

4-Punts band (optioneel).

Op de pees (**P**) in fig. 16 zijn extra banden toe te voegen (deze zijn reeds aanwezig indien in deze configuratie is besteld). De extra banden op de gordel hebben als functie de riem op de juiste hoogte in positie te houden.

Til het label (**X**) in fig. 16 omhoog en schuif de 4-punts band op de pees in positie achter de stopper (**Y**) (fig. 17).

Monteer nu de gordel op de rolstoel zoals beschreven onder het kopje **Montage gordel** (pag. 4).

Monteer de meegeleverde 25mm klapgespen in de blauwe regio (fig. 18). Let hierbij ook op de aanwijzingen van de rolstoelfabrikant.

Indien de klapgespen meer in richting knie van de cliënt worden bevestigd, zal de positioneringsband meer naar beneden worden getrokken. Bepaal deze positie samen met de behandelaar.



De 4-punts banden zijn voorgemonteerd of na te bestellen via www.posigo.nl

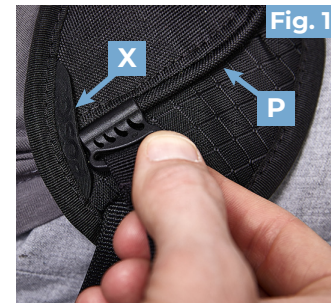


Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18

Vervangen / aanbrengen gesp.

Schuif de polstering terug zodat de metalen clip vrij komt (fig. 19). Haak het bevestigingsdeel van de gesp achter de clip en trek stevig aan tot het bevestigingsdeel goed in de clip verankerd is (fig. 20). Schuif hierna het polsterdeel weer op zijn plaats (fig. 21). Neem de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de gesp te verwijderen.



Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21



Wanneer de cognitieve en/of lichamelijke omstandigheden van de gebruiker kan leiden tot onverwachte opening van de drukgesp, dient te allen tijde een zorgverlener aanwezig te zijn bij gebruik van de gordel.



De pin sluiting is tegen het onbedoeld openen van de gesp. Een zorgverlener in bezit van ontgrendelingsgereedschap (bijv. een pen) dient te allen tijde aanwezig te zijn om de gordel in geval van nood te kunnen openen.

Notities:



Posigo is een handelsmerk van
The Hague Care Development BV
Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde (NL)

www.posigo.nl
info@posigo.nl

© 2023 Alle rechten voorbehouden.

